

Le nouveau Stylo anti-rides

Des soins subtils, par touches précises pour paraître toujours jeune.
Votre objectif : Moins de rides et moins de poches sous les yeux.

La puce technologique IC CMOS du stylo conduit des photons au travers de la peau et accélère la production de collagène, réduit les rides et rend la peau plus douce en effectuant un lifting.

Trois intensités en fonction de la profondeur de vos rides.

AAG, 36 rue de Penthièvre, 75008 Paris
www.beauty-toys.fr

Mise en route

Installer correctement la batterie fournie avec l'appareil

Appuyer sur le bouton "Power" pour mettre en marche

Sélectionner l'intensité (fort, moyen, faible en fonction de la profondeur des rides) en appuyant sur le bouton "Power".

Poser le pouce et l'index de chaque côté des connecteurs du stylo (circulation du courant)

Appuyer le stylet conducteur d'énergie sur la peau

Test

Si le stylo émet des bips sonores et que l'indicateur du niveau d'énergie clignote, l'appareil fonctionne correctement.

Utilisation


- 1) Nettoyez puis séchez votre peau
- 2) Appliquez votre gel conducteur, un gel pour les yeux ou des huiles essentielles autour des yeux
- 3) Mettez en route l'appareil et choisissez votre niveau d'intensité en appuyant sur le bouton "Power"
- 4) Saisissez des deux côtés votre stylo anti-rides et posez le sur vos rides (pattes d'oie par exemple)
- 5) Bougez le doucement de l'intérieur vers l'extérieur et arrêtez vous 15 secondes sur les points à traiter
- 6) Répétez l'opération 4 fois sur les rides

Contre-indications

Si vous avez un quelconque problème avec vos yeux, ne pas utiliser

Si vous venez d'effectuer une opération oculaire, attendez un an avant de vous en servir

Ne peut être utilisé au dessous de 15 ans

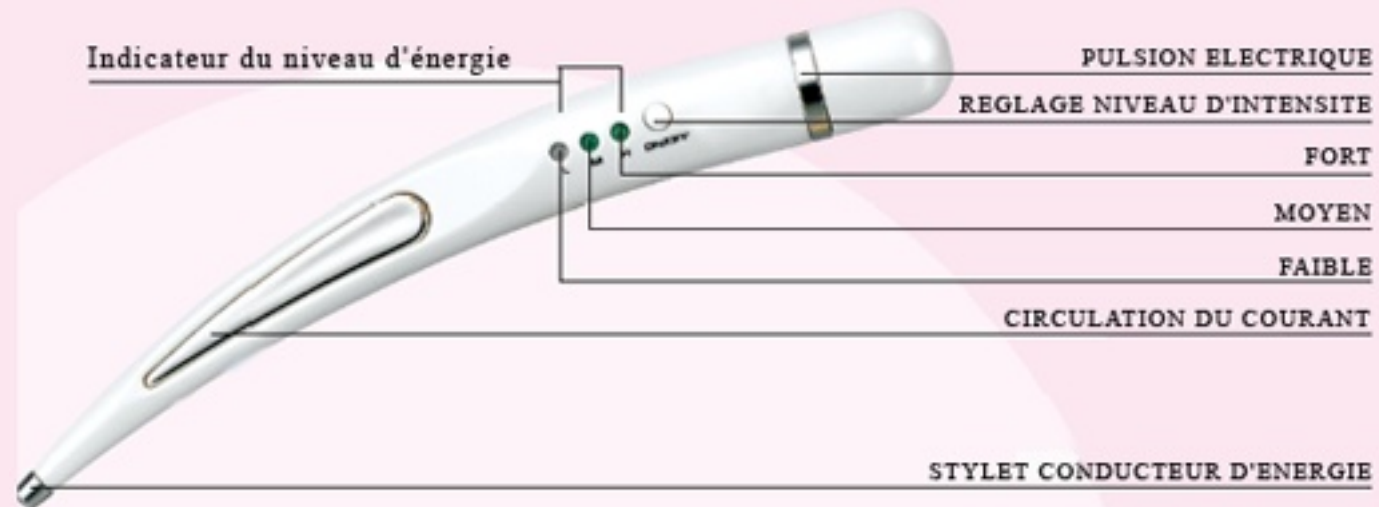

Conseils d'utilisation

- 1) Utilisez 1 à 2 fois par jour maximum
- 2) Espacez les traitements au minimum de 6 heures
- 3) Gardez une peau propre autour des yeux
- 4) Vous pouvez utiliser dans la journée une crème pour vos yeux et faire un traitement avec le stylo anti-rides le soir
- 5) N'hésitez pas à faire des photos avant l'utilisation puis 2 semaines après

Ne pas démonter l'appareil

Ne pas le laisser dans un endroit humide et ne pas le mettre dans l'eau

Ne pas le laisser à proximité de champs magnétiques (téléphone portable par exemple)

Ne pas l'exposer au soleil et ne pas mettre de produit corrosif sur l'appareil